

People have Priority



Sterilizálás, higiénia és ápolás

Higiénia a legmagasabb szinten

Éljenjáró sterilizálás, higiénia és ápolás a fogászati praxisban! A W&H teljes körű megoldást kínál az Ön kézi- és könyökdarabjainak, illetve turbináinak higiéniai körforgásához.



A kézidarabok és motorok előkészítésének pontos munkafolyamatát lásd a wh.com weboldalon.



Sterilizálás, higiénia és ápolás

A vállalat	4 – 5
1. sz. termékáttekintés: Assistina 3x3, Assistina 301 plus, Assistina 3x3 és Lisa gyorsciklus	6 – 7
2. sz. termékáttekintés: Lisa, Lina, Multidem	8 – 9
Assistina 3x3 / 3x2	10 – 11
Assistina 301 plus	12 – 13
Assistina 3x3 és Lisa gyorsciklus	14 – 15
Lisa	16 – 17
Lina	18 – 19
Visszakövethetőség	20 – 21
Lisa és Lina tartozékok	22 – 23
Seal ²	24 – 25
Multidem	26 – 27
Osmo, Dist, Prim	28 – 29
RDG-adapterkészlet	30
Műszaki adatok	31 – 33
Adapter rendszeráttekintés	34 – 35



W&H Dentalwerk
Bürmoos (A)



W&H Sterilization
Brusaporto (I)

Középpontban az ember.

Az egészséges fejlődés alapja az előrettekintő hozzáállás. Ez éppúgy érvényes a sterilizálásra, higiénia és ápolásra, mint a W&H vállalatra: hiszen családi vállalkozásként generációk óta a megfelelő előrelátással tevékenykedünk.

Sikerünk titka: a W&H kezdettől fogva az embert állítja a középpontba – legyen szó akár üzleti partnerről, akár ügyfélről, páciensről vagy munkatársról. Joggal adódna a kritikus kérdés: ez tényleg így történik a gyakorlatban? A válaszunk: tegyen próbára minket!



People
have
Priority

a W&H gyors áttekintése

- > az ausztriai központ
- > világszerte 1000 munkatárs
- > 80 munkacsoport
- > 1890-ben alapította Berlinben
Jean Weber és Hugo Hampel
- > 3 gyártóbázis
- > 18 leányvállalat
Európában és Ázsiában
- > 95% feletti exporthányad

További információk:
wh.com

PEOPLE HAVE PRIORITY



Bármilyen érje Önt,

a W&H higiéniai és ápolási programjával
mindenre fel van készülve.

Vegye fel a kapcsolatot most az Ön fogászati termék-forgalmazójával, vagy látogasson el a wh.com weboldalra.



»Az automatikus külső tisztítással az Assistina 3x3 az első számú választás a turbinák, kézi- és könyökdarabok sterilizálásra való előkészítéséhez.«

Dr. Klaus Kohlpaintner,
fogorvos



»Assistina 301 plus – rendkívül megbízható segítség a munkatársaimnak az eszközeim olajozásához hosszú évek óta.«

Dr. Florian Gierl,
fogorvos



»Az Assistina 3x3 és a Lisa számomra az ideális kombinációt nyújtja az eszközök gyors előkészítéséhez.«

Dr. Regina Becker,
fogorvos.

Az előnyök áttekintése

- > Automatikus belső tisztítás (hajtómű-alkatrészek és spraycsatornák)
- > Automatikus külső tisztítás (Assistina 3x3)
- > Eszközök tökéletes olajozása
- > Rövid, mintegy hat perces ciklusidő
- > Egyszerű kezelés
- > Optimális ár/teljesítmény arány
- > Hitelesített eljárás

Assistina 3x3 / 3x2



Bővebb információ
lásd 11. oldal

Előnyök áttekintése

- > Automatikus rotációs kenés
- > Automatikus olajadagolás
- > Eszközök optimális olajozása
- > Spraycsatornák tisztítása tisztító oldattal
- > Átfúvatás és szárítás sűrített levegővel

Assistina 301 plus



Bővebb információ
lásd 13. oldal

Előnyök áttekintése

- > Rövidebb előkészítési idő az eszközökhöz
- > 6 perc az Assistina 3x3 esetében
- > 13 perc a Lisa gyorsciklusa esetében
- > 19 perc elteltével: megtisztított, ápolat és sterilizált eszközök


Assistina 3x3 és Lisa gyorsciklus

Bővebb információ
lásd 15. oldal



»A Lisa egy nagy teljesítményű, egyszerűen kezelhető sterilizátor. Használata jelentősen megkönnyíti a napi munkavégzést!«

ZA Jörg Pinder,
fogorvos

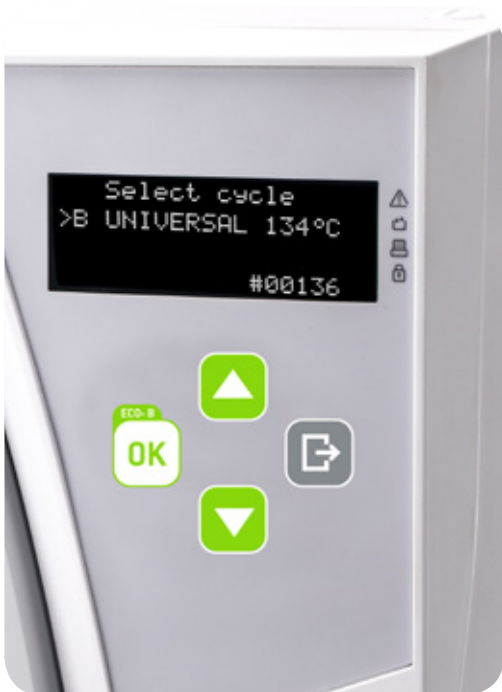

»A Lina számunkra az ideális alapmodell az eszközök költséghatékony előkészítéséhez.«

Dr. Jakob Svoboda,
fogorvos



»Szűrőcsere eláztatás, szerelő és tartálycipelés nélkül«

Dr. Maria Boshamer,
állatorvos

Előnyök áttekintése

- > Kezelőfelület és felhasználóbarát menürendszer
- > Az innovatív, szabadalmaztatott Eco Dry technológia B osztályú ciklusokat tesz lehetővé 2 kg töltés esetén 30 percre csökkentett ciklusidő mellett
- > Teljes körű visszakövethetőség a valós idejű távfelügyeletet biztosító Wi-Fi hálózatnak és a mobilalkalmazásnak köszönhetően
- > Átdolgozott kialakítás minimálisra csökkentett résekkel az egyszerű tisztítás érdekében
- > Magyarozó karbantartási animációk az érintőképernyőn
- > Az Ethernet hálózaton egy vonalkódnymtatót négy sterilizátor használhat
- > Akkumulátorról működtetett ajtónyitó
- > Automatikus diagnosztikai ciklusok
- > Programozható ciklusindítás
- > Automatikus víztöltőszelep
- > Vízelválasztó-rendszer, porszűrő és vízminőség-érzékelő
- > Moduláris első lábak

Lisa



Bővebb információ
lásd 17. oldal

Előnyök áttekintése

- > Az ECO B ciklus segítségével felére csökkenthető a ciklusidő
- > Alacsony zajszintű működés a szabadalmaztatott vízelválasztó-rendszernek köszönhetően
- > Felhasználóbarát gombsor az összes sterilizálási opció egyszerű kezeléséhez
- > Beépített porszűrő a belső alkatrészek megóvására
- > Integrált automatikus víztöltőszelep (opcionális)
- > Automatikus digitális ciklusrögzítés az USB-meghajtóra (opcionális)

Lina



Bővebb információ
lásd 19. oldal

Előnyök áttekintése

- > Gyors és egyszerű patroncsere szerszám nélkül
- > A patron rögzítés nélkül behelyezhető
- > Alkalmazható hagyományos sterilizátorokhoz és előkészítő berendezésekhez
- > Rugalmas alkalmazás a szórópisztolynak köszönhetően
- > Nincs szükség elektromos csatlakozásra
- > Optimalizált ioncserélő gyanta
- > A tisztított víz megfelel a gőzsterilizátorok üzemeltetésére és az eszközök előkészítésére vonatkozó ajánlásoknak és előírásoknak

Multidem



Bővebb információ
lásd 27. oldal

Assistina 3x3 / 3x2



Tökéletes tisztítás mind kívül, mind belül

Belül is tiszta, kívül is tiszta. Hogy Ön azonnal arra koncentrálhasson, ami igazán fontos: a pácienseire. Mert az Assistina 3x3 automatikusan átveszi Öntől többek között a kézi- és a könyökdarabok időigényes előkészítését a sterilizáláshoz.



Belső tisztítás

A összes hajtómű-alkatrész és spraycsatorna alapos tisztítása elősegíti az eszközök tökéletes működését.



Külső tisztítás (Assistina 3x3)

A szerves lerakódások sterilizálás előtti eltávolítása a páciensek és a rendelői munkatársak biztonságát szolgálja.



Tökéletes olajozás

A hajtómű-alkatrészek precíz, automatikus olajozása meghosszabbítja eszközeinek élettartamát.




Rekordidő

A rövid, mintegy hat perces ciklusidő csökkenti az eszközök szokásos előkészítésének teljes időtartamát.



Egyszerű kezelés

Az Assistina működése magától értetődő, az előkészítés gombnyomásra történik. Egyáltalán nem igényel betanítást.

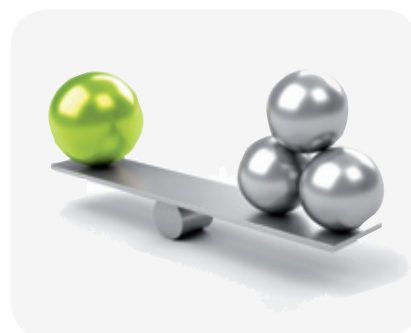

Ár/teljesítmény arány

Kiemelkedően magas hatásfokú tisztítás alacsony beszerzési költségek és különösen takarékos fogyasztás mellett.

Assistina 3x2

3 eszköz x 2 előkészítési lépés:

Belső tisztítás, olajozás

Assistina 301 plus



Ápolás gombnyomásra

Egyszerű, kényelmes, biztonságos. Az Assistina 301 plus készülékben automatikusan megy végbe az ápolási folyamat: rotációs kenés, spraycsatornák belső tisztítása, átfúvatás sűrített levegővel. Mindössze 35 másodperc: eszköze tökéletesen ápoltt. Ezáltal jelentős mértékben nő az eszközök élettartama.



Automatikus rotációs kenés

Az olaj optimálisan eloszlik, és egyenletes kenőfilm alakul ki. A szennyeződések feloldódnak és eltávolítódnak.



Automatikus olajadagolás

Csak annyi olajat használ, amennyire az eszközök optimális kenéséhez szükség van. Sem többet, sem kevesebbet.



Áram nélküli működtetés

Az Assistina 301 plus áram nélkül működik. A működtetéshez csak sűrítettlevegő-csatlakozásra van szükség.



Optimális tisztítás

Az Assistina 301 plus megtisztítja és átöblíti a folyadék- és levegőcsatornákat tisztító oldattal, és kiszárítja ezeket sűrített levegővel.



Optimális olajozás

A belső alkatrészek tisztítása és kenése W&H Service Oil F1 használatával meghosszabbítja az eszközök élettartamát.



A tökéletes olajozás érdekében

W&H Service Oil F1, MD-400, az olajozó spray, a W&H kutatásaiból származó termék.

Assistina 3x3 és Lisa gyorsciklus



Sterilizálás rekordidő alatt

Megtisztítva, ápolva, sterilizálva. Az Assistina 3x3 tisztítási eljárása a Lisa gyorsciklussal kombinálva lerövidíti a teljes előkészítési időt. Mindössze 19 perc elteltével újra rendelkezésére állnak az eszközök.



Letörléses fertőtlenítés

A tisztítás és az ápolás előtt szükség esetén letörléses fertőtlenítést kell végezni.

Tisztítás és ápolás

Az Assistina 3x3 készülék képes három eszközt mindössze 6 perc alatt belül és kívül megtisztítani és ápolni.

Sterilizálás

A Lisa gyorsciklus segítségével az eszközök mindössze 13 perc elteltével kivethetők a sterilizátorból használatra kész állapotban.



Assistina 3x3 / 3x2

A tisztítási eljárás hitelesítését tanúsítvány igazolja, amely megtekinthető a wh.com oldalon.



Assistina 3x2

Az Assistina 3x2 esetében az eszközök előkészítése két lépésben történik: belső tisztítás, olajozás.

Lisa



Pontosság és tökéletesség

Sebesség. Egyszerű kezelés. Megbízható visszakövethetőség. A W&H Lisa sterilizátor egy modern és kiváló minőségű berendezés, amely kiemelkedő sterilizációs hatékonyságot nyújt. A sterilizátor gyorsabb B osztályú sterilizálási ciklust és intuitív kezelőfelületet kínál, továbbá egy egyedülálló rendszert biztosít a valós idejű távfelügyelethez.



Egyszerű kezelés

A Lisa érintőképernyőjének intuitív menüje számos alkalmazási lehetőséget kínál, így minden igénynek képes megfelelni.



Nagy teljesítmény

A 2 kg töltésnél 30 percre csökkentett ciklusidő gondoskodik az eszközök hosszabb élettartamáról és az alacsonyabb energiafelhasználásról. Az innovatív, szabadalmaztatott Eco Dry technológia a szárítási időt a töltés tömegéhez igazítja.



Teljes körűen optimalizált visszakövethetőség

Ezt a W&H Lisa mobilalkalmazás, a vonalkódnymató és az USB-meghajtó teszi lehetővé.



Kapcsolatkész, egyszerű és időkímélő

Amikor az egységek kommunikálni kezdenek, a visszakövethetőség fogalma új értelmet nyer. Egyszerűbbé válik a munkavégzés a praxisban, a csapatának pedig több ideje marad.



Ergonómia

A felületek sima kialakításának és a minimálisra csökkentett réseknek köszönhetően egyszerűbbé válik a tisztítás.

Lina



A sterilizálás lényege

Egyszerű és bővíthető. A Lina a W&H kínálatának egyik sterilizátora.

A készülék a B osztályú ciklusoknak és az új USB-adatnaplózásnak köszönhetően maximális biztonságot és kiváló ár érték arányt kínál.



Kizárólag B-osztályú ciklusok

A Lina autokláv kizárólag B-osztályú ciklusokkal valamint kis rakománynál, rövid ECO B ciklusokkal dolgozik.



Egyszerű navigálás

Minden sterilizálási opció könnyen elérhető az egyszerűen kezelhető tasztatúra segítségével.



ECO B sterilizálási program

A ciklusidő felére csökkenthető kis mennyiségű rakománynál.



Beépített adatnaplózás

A beépített adatnaplózás segítségével a sterilizációs ciklusok további kábelek és külső berendezések nélkül egy USB-meghajtóra menthetők.



Vonalkódnymotató

A vonalkódok nyomtatásához a LisaSafe összekapcsolható a sterilizátorral. Együtt a beépített adat jelentkezen a nyomonkövetési rendszer fokozott.

Visszakövethetőség



Visszakövethetőség gombnyomásra

Visszakövethető, hiánytalan, biztonságos. A visszakövethetőségi koncepció biztosítja Önnek az összekötő elemet a sterilizálási ciklus és a páciens kartonja között. Ezáltal garantálható a higiéniai protokoll hiánytalan betartása.



Kockázatmentes ciklusválasztás

Az egyszerű menüfelépítés lehetővé teszi az automatikus sterilizálási ciklusok biztonságos kiválasztását.



Biztonságos ciklusok

A folyamatértékelő rendszer figyeli az összes aktuális ciklusparamétert, és garantálja a sikeres sterilizálási eredményt.



Rakomány ellenőrzése/jóváhagyása

A steril rakomány ellenőrzésre és jóváhagyásra kerül. A ciklusprotokoll automatikusan mentésre kerül a memóriakártyára.



Egyszerű felcímkézés

A kinyomtatott vonalkódos címkéket a sterilizált eszközök csomagolására lehet ragasztani.



Tárolás

A becsomagolt eszközök felhasználásánál a First In – First Out (FIFO) alapelvet kell alkalmazni. Az eszközöket a lejárati dátum előtt kell felhasználni.



Adatátvitel

Az információk bevihetők vonalkóddolvasóval a páciens adatfájljába, vagy a címke felragasztható a páciens kartonjára.

LisaSafe, Lisa mobilalkalmazás, Sprint



Tartozékok

Kompakt, praktikus, jó. A W&H számos tartozékot kínál a sterilizálási eljárás optimalizálásához. A kis extrák nagy eredményekhez vezetnek. A fogászati praxis működése egyszerűbbé válik, az Ön csapatának pedig több ideje marad.



LisaSafe vonalkódnymtató

A vonalkódnymtató segítségével egyszerűen és kényelmesen létrehozható a kapcsolat a sterilizálási ciklus és a páciens kártya között.



Vonalkódo olvasó

A LisaSafe csomag vonalkódo olvasót is tartalmaz, amelynek segítségével beszkenelheti a vonalkódokat a páciens adatfájljába.



Lisa mobilalkalmazás

A Lisa mobilalkalmazás segítségével egyidejűleg akár 4 sterilizátort is felügyelhet. A Lisa alkalmazás lehetővé teszi a ciklusjelentések lehívását az okostelefonok kamerájával.



Sprint

A ciklusprotokollok kinyomtatásához hőpapírra, a papírra vonatkozó, 10 éves garanciával.



Helix-teszt

A Helix-teszt egy vizsgálati indikátor rendszer, amely kizárólag B osztályú sterilizátorokhoz alkalmas.

Seal²



Tökéletes fóliahegesztési eljárás

Expressz csomagolás a Seal² segítségével. Nehéz megőrizni egy termék sterilitását. Ez csak úgy érhető el, ha tökéletesen hermetikus és ellenálló védelem áll rendelkezésre a sterilizált elem számára a környezeti hatásokkal szemben.



Seal²

A fólialezáró készülék mindössze 2 másodperc alatt 12 mm széles szigetelő varratot hoz létre.



Hermetikus szigetelés

Az elektronikusan szabályozott lezárási hőmérséklet garantálja a tökéletesen hermetikus szigetelést.



Szabadalmaztatott dupla tekerstartó

A szabadalmaztatott dupla tekerstartó sokféle tekercszélességet lehetővé tesz.



Komfort és felhasználóbarát kialakítás

Az optimális kezelésről az átlátszó hegesztőkészülék és az integrált munkafelület gondoskodik.



Rugalmas munkavégzés

A tekerstartó levehető az állomásról, és felszerelhető a falra, ami lehetővé teszi a rugalmas munkavégzést szűk helyen is.

Multidem



Tökéletesen tiszta víz az összes rendszer számára. A Multidem ioncserélt vizet biztosít a gőzgenerátor számára, és számos hagyományos sterilizátorhoz és előkészítő berendezéshez használható.



Felhasználóbarát

A patroncsere gyorsan és szerszám nélkül elvégezhető. A patron rögzítés nélkül behelyezhető.



Kompatibilis

A Multidem alkalmazható hagyományos sterilizátorokhoz és előkészítő berendezésekhez.



Praktikus

A Multidem rendelkezik egy kiegészítő szórópisztollyal, és tökéletesen alkalmas az eszközök sterilizálás előtti leöblítésére.



Takarékos

A Multidem használatához nincs szükség elektromos csatlakozásra. Optimalizált ioncserélő gyantával rendelkezik.



Biztonságos

A tisztított víz megfelel a gőzsterilizátorok üzemeltetésére és az eszközök előkészítésére vonatkozó ajánlásoknak és előírásoknak.

Osmo, Dist, Prim



Vízelőkészítő rendszerek

Kiváló minőségű, ioncserélt víz. A kiváló minőségű, ioncserélt víz garantálja az egyenletes, optimális teljesítményt, és meghosszabbítja a sterilizátor és az eszközök élettartamát.



Osmo

Az Osmo képes több sterilizátor automatikus feltöltésére és ürítésére egyidejűleg.



Szórópisztoly

Az Osmo rendelkezik szórópisztollyal egyéb berendezések manuális feltöltésére vagy az eszközök sterilizálás előtti leöblítésére.



Tartály

A víztartály űrtartalma 9 liter.



Dist

A LisaDist kevesebb, mint 5 óra alatt 4 liter kiváló minőségű desztillált vizet termel.



Prim

A LisaPrim a víz vezetőképességének mérésével ellenőrzi a vízminőséget.


W&H adapterkészlet tisztító és fertőtlenítő készülékekhez

Kompakt, praktikus, univerzális. A W&H adapterkészlet lehetővé teszi a tartozékok és kisebb alkatrészek komplikációk nélküli, hitelesített, gépi előkészítését thermodezinfektorban – belül és kívül.



W&H adapterkészlet

A W&H adapterkészletet speciálisan tartozékok és kisebb alkatrészek gépi előkészítéséhez fejlesztették ki.

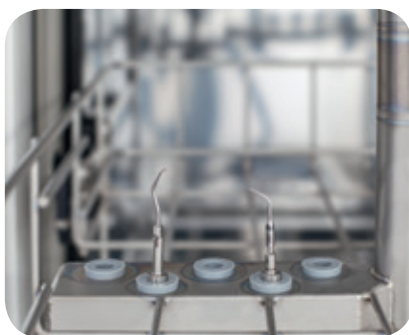


Hitelesített tisztítás

Támogatja a belvilággal rendelkező eszközök, például depurátorhegyek vagy hűtőcsövek belső tisztítását és fertőtlenítését.



Csavarmenetek belső és külső tisztítását

Az adapterfej speciális kialakítása biztosítja a belső és külső csavarmenetek tisztítását.

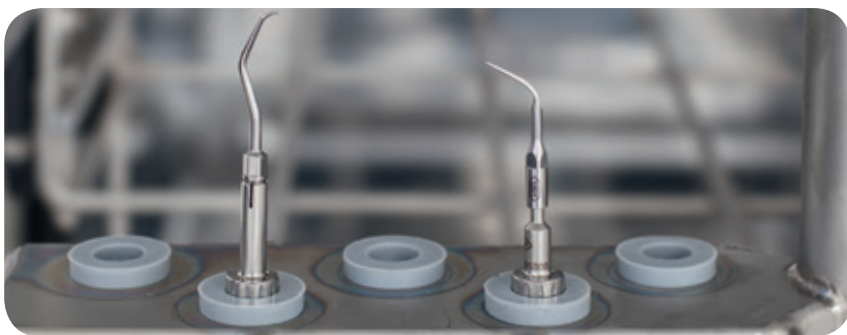

Univerzálisan alkalmazható

Alkalmas az összes 8 mm-es [M8x1] belső menettel rendelkező RDG öblítőcsőhöz vagy ahhoz illeszkedő gumibetéthez.

A W&H adapterkészlet kompatibilis az összes M3x0,5 mm menetű hegygel. A részletes listát a wh.com oldalon találhatja meg.



Ár/teljesítmény arány

A legmagasabb tisztítási és fertőtlenítési hatékonyság alacsony beszerzési költségek mellett.

Assistina 3x3 / 3x2

CE

Típus:	3x3	3x2
Eljárás:	Belső tisztítás, külső tisztítás, olajozás	Belső tisztítás, olajozás
Alkalmas a következőkhöz:	Kézi- és könyökdarabok, turbinák, légmotorok és levegős fogköeltávolító eszközök	
Hálózati feszültség:	100 – 240 V	
Max. teljesítményfelvétel:	40 VA	
Levegőigény:	kb. 100 nl/perc	kb. 60 nl/perc
Üzemi nyomás:	5 – 10 bar (a beépített, automatikus nyomásszabályozó szabályozza)	
Magasság / szélesség / mélység:	358 x 207 x 397 mm	
Feltöltési mennyiség:	1.000 ml W&H Activefluid, MC-1100, 200 ml W&H Service Oil F1, MD-200	

A különböző Assistina 3x3 / 3x2 adapterekre vonatkozó, részletes adatokat a wh.com oldalon találhatja meg.



W&H Activefluid

Tisztító oldat az eszközök alapos belső és külső tisztításához az Assistina 3x3/3x2 használata esetén.

W&H Service Oil F1

A hajtómű alkatrészeinek optimális olajozása növeli a precíziós fogászati eszközök élettartamát.

Assistina 301 plus

CE

Típus:	Assistina 301 plus
Ciklusidő:	kb. 35 perc
Service Oil feltöltési mennyiség:	250 ml, kb. 3.500 ápolási ciklushoz
Tisztító oldat feltöltési mennyiség:	250 ml, kb. 2.500 ápolási ciklushoz
Csatlakozás:	gyorskuplungos sűrítettlevegő-csatlakozás Ø 6 x 4 mm-es levegőtömlőhöz, a beépítési oldalon R 1/8" belső menettel
Üzemi nyomás:	4 - 10 bar alakító nyomás (automatikus nyomásszabályozás)
Levegőigény:	kb. 60 liter/perc
Magasság / szélesség / mélység:	223 x 190 x 415 mm
Tömeg:	2,70 kg

Lisa



	Lisa 17	Lisa 22
Típus:	VA131-17	VA131-22
Kamara mérete:	17 liter	22 liter
Áramellátás:	200 – 240 Vac; 50 / 60 Hz; 10 A	200 – 240 Vac; 50 / 60 Hz; 10 A
Energiafogyasztás:	2,0 – 2,4 kW	
Külső méretek (Szé x Ma x Mé)	465 x 449 x 599 mm	
Tömeg (üres):	50,2 kg	51,7 kg
Tisztavíz-/szennyvítartály:	4 / 3,5 liter	
Munkatartomány:	7 – 12 ciklus	
A kamra hasznos térfogata (Szé x Ma x Mé)	195 x 195 x 297 mm	195 x 195 x 390 mm
Csatlakoztatási lehetőségek:	1 Ethernet csatlakozó, 3 USB csatlakozó, 1 serial csatlakozó, integrált szelep az automatikus vízbevezetéshez	

Lina



	Lina 17	Lina 22
Típus:	PRO13-003-17	PRO13-003-22
Kamara mérete:	17 liter	22 liter
Áramellátás:	200 – 240 Vac 50 / 60 Hz; 10 A	
Energiafogyasztás:	2 kW	
Külső méretek (Szé x Ma x Mé):	450 x 435 x 599 mm	
Tömeg:	39 kg	40 kg
Tisztavíz-/szennyvítartály	4 / 3,5 liter	
Munkatartomány:	5 – 10 ciklus	
A kamra hasznos térfogata (Szé x Ma x Mé):	195 x 195 x 297 mm	195 x 195 x 390 mm
Csatlakoztatási lehetőségek:	1 soros csatlakozó, 1 USB és 1 soros csatlakozó (opcionális), integrált szelep az automatikus vízbevezetéshez (opcionális)	

Multidem

Típus:	Multidem C27
Üzemi nyomás:	2 bar - 8.6 bar (max.)
Bemeneti víz hőmérséklet:	4 – 30 °C / 40 – 86 °F
Névleges térfogatáram:	60 l/h
Kimenő vízminőség:	ioncserélt (EN 13060)
Bemenő vízminőség:	ivóvíz
Tömeg:	2,7 kg
Szélesség / mélység / magasság:	124 / 123 / 476 mm
Beépítési helyzet:	függőleges
Tömlőhosszúságok:	2 x 3 m
Biztonsági szelep:	Igen
Visszafolyásgátló:	

Osmo

Típus:	Osmo
Méreték [Szé x Mé x Ma] mm:	520 x 200 x 420
Tömeg:	11,0 kg
H ₂ O - nyomás:	1 ± -5 bar

Seal²

Típus:	Seal ²
Hálózati feszültség:	200 – 240 V / 100 W
Méreték [Szé x Mé x Ma] mm:	452 x 480 x min 315 – max 420
Tömeg:	7,1 kg

Adapter rendszeráttekintés – Assistina 3x3 / 3x2

Kézi- és könyökdarabok

Az összes ISO-csatlakozóval rendelkező kézi- és könyökdarab

Könyökdarabok levehető fejjel



Sirona T1 Classic kézi- és könyökdarabok



Entran könyökdarabfej



Turbinák

W&H turbinák, légdepurátorok és légmotorok Roto Quick-rendszerrel



Sirona T1, T2, T3



Turbinák Multiflex®*-csatlakozással



Turbinák Borden 2(3)-lyukú csatlakozással







Turbinák vagy adapterek szabványos 4-lyukú csatlakozással (fényel vagy fény nélkül)

*) A Multiflex® olyan harmadik fél védjegye, amely nem áll kapcsolatban a W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH vállalattal






Adapter rendszeráttekintés – Assistina 301 plus

Kézi- és könyökdarabok

Az összes ISO-csatlakozóval rendelkező kézi- és könyökdarab		
Könyökdarabok levehető fejjel		Adapter, REF 02679000
Sirona T1 Classic kézi- és könyökdarabok		Adapter, REF 02691000
FG-befogórendszer (W&H, Sirona)		Adapter, REF 02693000
Entran könyökdarabfej		Adapter, REF 05204600



Turbinák

Sirona T1, T2, T3		Adapter, REF 02692000	Alap adapter REF 02685000  4-lyukú turbinák
W&H turbinák, légdepurátorok és légmotorok Roto Quick-rendszerrel		W&H adapter, REF 02690400	
Turbinák vagy adapterek 4-lyukú fix csatlakozással (fényel vagy fény nélkül)			
Turbinák Multiflex®*-csatlakozással		Adapter, REF 04713200	
Turbinák Borden 2/3-lyukú fix csatlakozással		Adapter, REF 07014500	

*] A Multiflex® olyan harmadik fél védjegye, amely nem áll kapcsolatban a W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH vállalattal

Sterilizálás, higiénia és ápolás

Szimbólumfotók ábrája. A szállítási terjedelem nem tartalmazza a kiegészítő tárgyakat és a bemutatott tartozékokat.

Olvassa be mobiltelefonja segítségével a QR-kódot, és tudjon meg többet termékeinkről



W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t + 39 035-66 63 000
f + 39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com